


BTS 310[®]

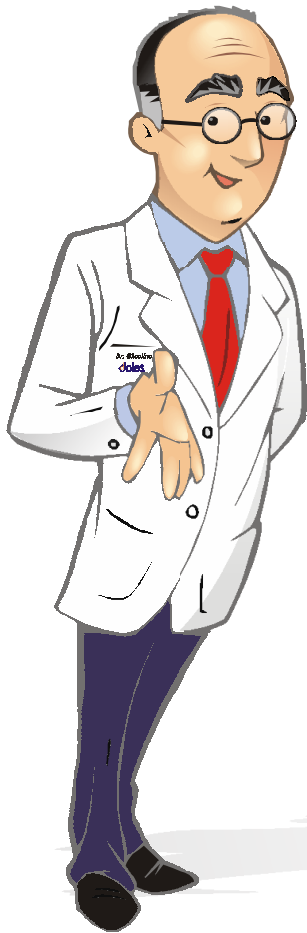

ÍNDICE

KIT	PÁGINA	KIT	PÁGINA
ALBUMINA	01	FOSFATASES	23
ALDOLASE	02	FOSFATO	24
ALT/TGP	03	FOSFATO UV	25
AMILASE	04	GAMAGT	26
AMILASE CNPG	05	GAMA GT CINÉTICA	27
AST/TGO	06	GLICOSE ENZ. LÍQUIDA	28
BILIRRUBINA	07	GLUCOX 500	29
CÁLCIO	08	HEMOGLOBINA	30
CÁLCIO ARSENAZO	09	HEMOGLOBINA GLICADA	31
CKMB (LANÇAMENTO)	10	MAGNÉSIO	32
CK NAC	11	MICROPROTE pirogalol	33
CLORETO COLORIMÉTRICO	12	MUCOPROTEÍNAS	34
COLESTEROL ENZ. LÍQUIDO	13	POTÁSSIO	35
COLESTEROL HDL	14	PROTEÍNAS TOTAIS	36
COLESTEROL 250.....	15	TRANSAMINASES	37
COLINESTERASE	16	TRIGLICÉRIDES 120	38
CPK.....	17	TRIGLICÉRIDES ENZ. LÍQUIDO	39
CREATININA CINÉTICA	18	URATO 160	40
DHL	19	URATO ENZIMÁTICO LÍQUIDO	41
DHL UV	20	UREIA 500	42
FERRO	21	UREIA UV	43
FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA	22		

ALBUMINA

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	g/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	670
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	4.000

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

ALDOLASE

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	U/L
READING FILTER:	546
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	*
STANDARD:	40

* FAZER LEITURA NO MODO DE CUBETA.

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade e outro soro controle de valor elevado.

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

ALT/TGP

DELTA KINETICS WITH FACTOR

UNIT:	UI/L
READING FILTER:	340nm
FACTOR:	1746
STABILIZ. TIME:	1
INCUBATION TIME:	60
INTERVAL TIME:	20
INTERVALS NUMBER:	4
SIPPING VOLUME:	400
REACTION SLOPE:	Decrease
TEMPERATURE:	37

Procedimento Técnico

Vide Instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

AMILASE

ABSORVANCES

MONOCHROMATIC

READING FILTER: 670

SIPPING VOLUME: *

STABILIZ. TIME: 3

TEMPERATURE: 37

* FAZER LEITURA NO MODO DE CUBETA.

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Cálculos:

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

AMILASE CNPG

DELTA KINETICS WITH FACTOR

UNIT:	UI/L
READING FILTER:	405nm
FACTOR:	3953
STABILIZ. TIME:	1
INCUBATION TIME:	30
INTERVAL TIME:	60
INTERVALS NUMBER:	2
SIPPING VOLUME:	500
REACTION SLOPE:	Increase
TEMPERATURE:	37

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

AST/TGO

DELTA KINETICS WITH FACTOR

UNIT:	UI/L
READING FILTER:	340nm
FACTOR:	1746
STABILIZ. TIME:	1
INCUBATION TIME:	60
INTERVAL TIME:	20
INTERVALS NUMBER:	4
SIPPING VOLUME:	400
REACTION SLOPE:	Decrease
TEMPERATURE:	37

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

BILIRRUBINA

TÉCNICA MACRO

. Bilirrubina Total

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING FILTER:	546
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
STANDARD:	10

. Bilirrubina direta

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING FILTER:	546
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
STANDARD:	10

. TÉCNICA MICRO

. Bilirrubina Total

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING FILTER:	546
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
STANDARD:	10

. Bilirrubina direta

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING FILTER:	546
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
STANDARD:	10

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

CÁLCIO

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	578
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	*
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	10.00

* FAZER LEITURA NO MODO DE CUBETA.

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

CÁLCIO ARSENAZO

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	670
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	500
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	10

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

CK MB

FIXED TIME WITH FACTOR

UNIT:	U./L
READING FILTER:	340nm
FACTOR:	1333
STABILIZ. TIME:	1
INCUBATION TIME:	180
INTERVAL TIME:	300
SIPPING VOLUME:	500
REACTION SLOPE:	Increase
TEMPERATURE:	37

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade e outro soro controle de valor elevado.

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

CK-NAC

DELTA KINETICS WITH FACTOR

UNIT:	U/L
READING FILTER:	340nm
FACTOR:	8199
STABILIZ. TIME:	1
INCUBATION TIME:	120
INTERVAL TIME:	60
INTERVALS NUMBER:	3
SIPPING VOLUME:	400
REACTION SLOPE:	Increase
TEMPERATURE:	37

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

CLORETOS COLORIMÉTRICO

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mEq/L
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	505
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	100.0

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

COLESTEROL ENZ. LÍQUIDO

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	505
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	200.0

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

COLESTEROL 250

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	505
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	200.0

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

COLESTEROL HDL

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dLS
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	505
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	100.0

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

COLINESTERASE

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	U/mL
READING FILTER:	405
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
STANDARD:	7.000

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade e outro soro controle de valor elevado.

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

CPK

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	U/L
READING FILTER:	670
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
STANDARD:	130

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade e outro soro controle de valor elevado.

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

CREATININA CINÉTICA

FIXED TIME WITH STANDARD

UNIT:	mg/dL
READING FILTER:	505nm
STABILIZ. TIME:	1
INCUBATION TIME:	30
INTERVAL TIME:	60
SIPPING VOLUME:	500
REACTION SLOPE:	Increase
STANDARD:	5
TEMPERATURE:	37

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

A programação acima refere-se a dosagem de creatinina no soro, para dosagem de creatinina na urina substituir o valor de standard por 50 e observar procedimento técnico.

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

DHL

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	U/L
READING FILTER:	505
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
STANDARD:	350.0

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

DHL - UV

DELTA KINETICS WITH FACTOR

UNIT:	UI/L
READING FILTER:	340nm
FACTOR:	8109
STABILIZ. TIME:	1
INCUBATION TIME:	30
INTERVAL TIME:	60
INTERVALS NUMBER:	3
SIPPING VOLUME:	400
REACTION SLOPE:	Decrease
TEMPERATURE:	37

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

FERRO

.Ferro Total e Capacidade de Fixação do Ferro

ABSORVANCES

MONOCHROMATIC

READING FILTER: 546

SIPPING VOLUME: *

STABILIZ. TIME: 3

TEMPERATURE: 37

* FAZER LEITURA NO MODO DE CUBETA.

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Cálculos:

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA

DELTA KINETICS WITH FACTOR

UNIT:	UI/L
READING FILTER:	405nm
FACTOR:	2764
STABILIZ. TIME:	1
INCUBATION TIME:	60
INTERVAL TIME:	60
INTERVALS NUMBER:	3
SIPPING VOLUME:	400
REACTION SLOPE:	Increase
TEMPERATURE:	37

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

FOSFATASES

PROGRAMAÇÃO EM U/L

. Fosfatase alcalina

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	U/L
READING FILTER:	405
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
STANDARD:	150

. Fosfatase ácida prostática (tubo C)

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	U/L
READING FILTER:	405
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
STANDARD:	28

. Fosfatase ácida não prostática (tubo D)

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	U/L
READING FILTER:	405
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
STANDARD:	28

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

FOSFATO

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	670
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	5.000

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

FOSFATO - UV

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	340
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	5.000

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

GAMA GT

DIFERENTIAL MODE WITH STANDARD

UNITS:	U/L
READING FILTER:	546
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
STANDARD:	100.00

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

GAMA GT CINÉTICA

DELTA KINETICS WITH FACTOR

UNIT:	U/L
READING FILTER:	405nm
FACTOR:	1111
STABILIZ. TIME:	1
INCUBATION TIME:	20
INTERVAL TIME:	60
INTERVALS NUMBER:	3
SIPPING VOLUME:	400
REACTION SLOPE:	Increase
TEMPERATURE:	37

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

GLICOSE ENZ. LÍQUIDA

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	505
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	100.0

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

GLUCOX 500

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	505
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	100.0

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

HEMOGLOBINA

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	g/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	546
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	é variável de acordo com o lote de Hb padrão.

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um controle com valor na faixa de normalidade e outro controle de valor elevado.

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

HEMOGLOBINA GLICADA

ABSORVANCES

MONOCHROMATIC

READING FILTER: 405

SIPPING VOLUME: 900

STABILIZ. TIME: 3

TEMPERATURE: 37

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Cálculos:

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um controle com valor na faixa de normalidade e outro controle de valor elevado.

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

MAGNÉSIO

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	505
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	2.000

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

MICROPROTE pirogalol

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	578
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	500
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	100

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um controle com valor na faixa de normalidade e outro controle de valor elevado.

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

MUCOPROTEÍNAS

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	670
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	6.000

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

POTÁSSIO

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mEq/L
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	578
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	5.000

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

PROTEÍNAS TOTAIS

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	g/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	546
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	4.000

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

TRANSAMINASES

Programação em F.R./mL

.TGO/AST

MULTISTANDARD SPLINE

UNITS: F.R./mL
READING MODE: MONOCHROMATIC
READING FILTER: 505
STABILIZ. TIME: 3
TEMPERATURE: 37
SIPPING VOLUME: 900
REACTION SLOPE: INCREASING
REPLICATES STD.: 1
REPLICATES SAMP.: 1

AXIS

ABS: LIN
CONC: LIN
STANDARD 1: 0.000
STANDARD 2: 24.00
STANDARD 3: 61.00
STANDARD 4: 114.0
STANDARD 5: 190.0
DILUTION FACTOR: 1.000

.TGP/ALT

MULTISTANDARD SPLINE

UNITS: F.R./mL
READING MODE: MONOCHROMATIC
READING FILTER: 505
STABILIZ. TIME: 3
TEMPERATURE: 37
SIPPING VOLUME: 900
REACTION SLOPE: INCREASING
REPLICATES STD.: 1
REPLICATES SAMP.: 1

AXIS

ABS: LIN
CONC: LIN
STANDARD 1: 0.000
STANDARD 2: 28.00
STANDARD 3: 57.00
STANDARD 4: 97.00
STANDARD 5: 150.0
DILUTION FACTOR: 1.000

.Programação em U.I./L

.TGO/AST

MULTISTANDARD SPLINE

UNITS: U.I./L
READING MODE: MONOCHROMATIC
READING FILTER: 505
STABILIZ. TIME: 3
TEMPERATURE: 37

SIPPING VOLUME: 900
REACTION SLOPE: INCREASING
REPLICATES STD.: 1
REPLICATES SAMP.: 1
AXIS
ABS: LIN
CONC: LIN
STANDARD 1: 0.000
STANDARD 2: 11.50
STANDARD 3: 29.40
STANDARD 4: 54.94
STANDARD 5: 91.58
DILUTION FACTOR: 1.000

.TGP/ALT

MULTISTANDARD SPLINE

UNITS: U.I./L
READING MODE: MONOCHROMATIC
READING FILTER: 505
STABILIZ. TIME: 3
TEMPERATURE: 37
SIPPING VOLUME: 900
REACTION SLOPE: INCREASING
REPLICATES STD.: 1
REPLICATES SAMP.: 1

AXIS

ABS: LIN
CONC: LIN
STANDARD 1: 0.000
STANDARD 2: 13.50
STANDARD 3: 27.50
STANDARD 4: 46.80
STANDARD 5: 72.30
DILUTION FACTOR: 1.000

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

TRIGLICÉRIDES 120

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	g/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	546
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	4.000

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

TRIGLICÉRIDES ENZ. LÍQUIDO

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	505
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	200.0

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

URATO 160

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	505
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	7.000

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

URATO ENZ. LÍQUIDO

POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	505
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	7.000

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

UREIA 500

END POINT WITH STANDARD

UNITS:	mg/dL
READING MODE:	MONOCHROMATIC
READING FILTER:	670
STABILIZ. TIME:	3
TEMPERATURE:	37
SIPPING VOLUME:	900
REACTION SLOPE:	INCREASING
STANDARD:	80.00

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)

UREIA-UV

FIXED TIME WITH STANDARD

UNIT:	mg/dL
READING FILTER:	340nm
STABILIZ. TIME:	1
INCUBATION TIME:	30
INTERVAL TIME:	60
SIPPING VOLUME:	400
REACTION SLOPE:	Decrease
STANDARD:	80
TEMPERATURE:	37

Procedimento Técnico

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um soro controle com valor na faixa de normalidade (**soro controle N - Doles**) e outro soro controle de valor elevado (**soro controle P - Doles**).

BTS-310 é marca registrada de seus proprietários.

REVISÃO: 13 (01/2012)